

采集注意事项:

切勿去除漏斗盖上的塑料膜。

每次将海绵插入供者口腔前, 请检查海绵是否破损。如果第一块海绵出现磨损或破裂, 请使用第二块海绵。

切勿使用其他的海绵或棉签替代。

预期用途: 用于人类唾液样本的采集。

指定用途: 从唾液样本搜集人 DNA。

内容: 工具包中含有稳定液体。

产品描述: 产品由漏斗盖、漏斗、管、海绵、管盖及稳定液组成。

警告和预防措施:

哽塞危险:

- 采集工具包中含有小盖子。
- 塑料袋中含有海绵。
- 在将海绵插入供者的口腔时, 应小心谨慎。

针对监督式采集:

- 请照看好供者。
- 切勿准许供者处理海绵、小盖子或包装。
- 如果稳定液体接触到您的眼睛或皮肤, 请用水清洗干净。切勿吞食。请登陆 www.dnagenotek.com 查阅化学品安全技术说明书 (MSDS)。

储存: 15°C 至 30°C

工具包的概述和说明:











Oragene-DNA 是一个为采集并稳定唾液样品而提供材料和说明的辅助采集工具包。

保质期: 30个月

收集到DNA的存储期: 60个月

生产日期: 见产品本身

标签文字说明:

-  查阅包装内的说明书
-  唾液采集方式 (有效期)
-  体外诊断医疗设备
-  目录号
-  CE 标志
-  注意, 请查阅使用说明
-  15°C / 30°C 存储说明
-  获授权代表
-  制造商
-  批号

使用说明


采集前, 请阅读所有说明。

步骤:


请确保供者在采集唾液样品前 30 分钟内不要进食、饮水、吸烟或嚼口香糖。

请确保供者在样品采集过程中保持直立状态。


遵循步骤 1 至 7 采集唾液样品可至多花费 15 分钟。

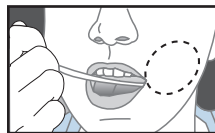


- 1** 将一块海绵置于颊囊中。沿着牙床和内脸颊轻柔地移动海绵 30 秒, 以尽可能多地吸收唾液。

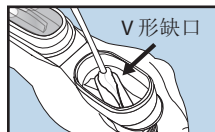


- 2** 当海绵浸满唾液后, 将其插入漏斗的 V 形缺口。采用与 V 形缺口内壁相反的扭转和推挤动作来拧出海绵中的唾液。唾液将流入试管中。

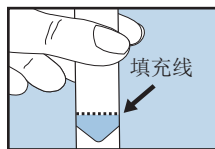


- 3** 重复上述步骤 (1 至 2) 使用该块相同的海绵, 直至液体唾液 (而非气泡) 达到填充线高度。每次将海绵插入供者口腔前, 请检查海绵是否破损。如果第一块海绵出现磨损或破裂, 请使用第二块海绵。轻拍试管底部的硬面, 以减少气泡数量。

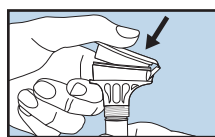

- 4** 单手持试管, 令其处于直立状态。另一只手用力按压盖子 (如图所示), 将盖子盖紧, 直到听见响亮的咔嚓声。盖子中的液体将流入试管, 同唾液混合。确保盖子盖紧。

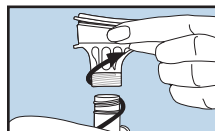

- 5** 保持试管处于直立状态。从试管上拧下漏斗。

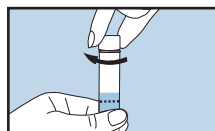

- 6** 使用小盖子盖紧试管。



- 7** 摇晃加盖的试管 5 秒钟。丢弃漏斗和海绵。



Emergo Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

代理人及售后服务单位:

名称: 捷通埃默高(北京)医药科技有限公司
地址: 北京市海淀区苏州街18号院-2楼12A08室
电话: 010-82608228
传真: 010-82609915

备案凭证编号: 国械备20170946号

产品技术要求编号: 国械备20170946号

OG-575 和 OG-675 Oragene®DNA 没有在美国销售。

*Oragene 是 DNA Genotek Inc. 的注册商标。

有些地区可能无法购买部分 DNA Genotek 产品, 详情请联系您的销售代表。

所有的 DNA Genotek 方案、白皮书和应用说明均可在我们网站 (www.dnagenotek.com) 的“支持”部分获得。

专利 (www.dnagenotek.com/legalnotices)

© 2018 DNA Genotek Inc.—OraSure Technologies, Inc. 子公司, 保留所有权利。

PD-PR-00325 (ZH - Chinese) Issue 4/2018-07 说明书修订日期: (以备案凭证下发日期为准 2017.09.12)



用于体外诊断

DNAgenotek



生产企业/备案人: DNA Genotek Inc.
生产企业地址/备案人住所:
3000 - 500 Palladium Drive,
Ottawa, Ontario, Canada K2V 1C2

电话: +1.613.723.5757
传真: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com