


OM-AC2 勺子附件

与  OMNIGene®-GUT 配合使用

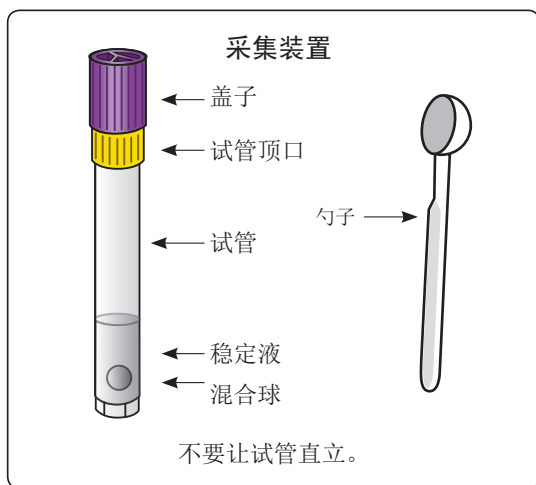

准备工作:

- 开始采集前排空膀胱。
- 采集不带有尿液或马桶水的粪便样本。
- 可能需要厕纸或纸巾。

检验包概要和说明:

OMNIGene®-GUT提供采集和稳定液体粪便样本(严重腹泻)中微生物DNA的材料和说明,内附小勺。






警告与注意事项:

- 仅限外用。
- 请勿从试管取下黄色的试管顶口。
- 请勿洒出试管中的稳定液。
- 如果液体或样本与眼睛或皮肤接触,请用水清洗。切勿摄入。
- 小物件可能有造成窒息的危险。

储存条件: 15°C-25°C

按照生物样本运输的相关规定进行运输。
参见www.dnagenotek.com的MSDS

标签图例:

-  样本采集时间(有效期)
-  目录编号
-  生产商
- 15°C/25°C 储存说明
-  注意,请查阅使用说明
-  批号

用户说明

采集前,请阅读所有说明

步骤:



1 重要准备工作:


- 开始采集前排空膀胱。
- 采集不带有尿液或马桶水的粪便样本。
- 可能需要厕纸或纸巾。



2 在握住黄色管顶部的同时,只松开紫色盖子,并放在一边供以后使用。

重要注意事项:

请勿取下黄色试管顶口。
请勿洒出玻璃管中的稳定液。

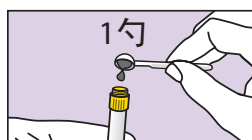


3 将一勺液体粪便样本转移到黄色试管顶部。

重要注意事项:


粪便样本不能流过黄色试管顶部。
继续执行第4步。



4 把紫色盖子的实心一端面朝下方,重新盖到黄色试管顶口上,旋紧

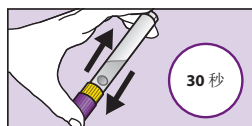

5 用力快速地来回晃动密封试管至少30秒。

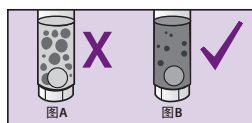

6 粪便样本将与试管中的稳定液混合在一起,并非所有的颗粒都会溶解。

重要注意事项:若仍有大颗粒未溶解(如图A所示),请继续摇晃。



7 将勺子放在原包装中,或包在卫生纸内并丢在垃圾箱中。

重要注意事项:按照检验包供应商提供的寄送说明,寄送要处理的样本。

DNA genotek

加拿大制造
生产企业/备案人: DNA Genotek Inc.
生产地址/备案人住所:
3000 - 500 Palladium Drive,
Ottawa, Ontario, Canada K2V 1C2

电话: +1.613.723.5757
传真: +1.613.723.5057
info@dnagenotek.com
www.dnagenotek.com

*OMNIGene 是 DNA Genotek Inc. 的注册商标。
某些 DNA Genotek 产品可能不向所有地区销售,详情可咨询您的销售代表。
在我们网站 www.dnagenotek.com 的技术支持专区,可查阅所有的 DNA Genotek 方案、白皮书和应用记录。

专利 (www.dnagenotek.com/legalnotices)
© 2018 OraSure Technologies, Inc. 旗下公司 DNA Genotek Inc., 保留所有权利。
PD-PR-00780 (ZH - Chinese) Issue 2/2018-08