
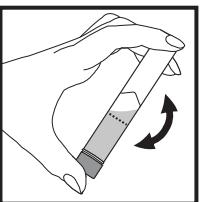
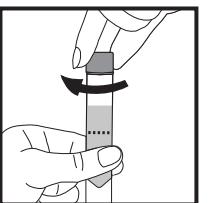
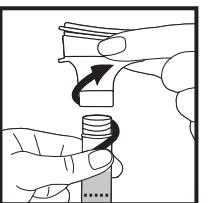
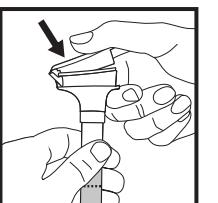


For Research Use Only
Not for use in diagnostic
procedures

REF DGR-400

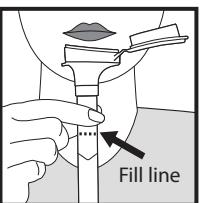

Superior samples
Proven performance

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Οδηγίες για τον χρήστη



Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν τη συλλογή.

Ενδεικνυόμενη χρήση: Για τη συλλογή ανθρώπινου DNA από δείγματα σάλιου.

Περιεχόμενα: Το κιτ περιέχει σταθεροποιητικό υγρό.

Προειδοποίησης και προφύλαξης: Ξεπλύνετε με νερό εάν το σταθεροποιητικό υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια ή το δέρμα. Μην καπαντείτε. Ανατρέξτε στο ΦΔΑΥ, στη διεύθυνση www.dnagenotek.com.

Μικρό καπάκι, κίνδυνος πνιγμού.

Αποθήκευση: 15°C / 30°C

Σύνοψη και επεξήγηση του κιτ:

Το go DNA™ είναι ένα κιτ απομίκησης συλλογής που παρέχει τα απαραίτητα υλικά και οδηγίες για τη συλλογή και σταθεροποίηση δειγμάτων σάλιου.

Προφυλάξεις για τη συλλογή:

MHN τρώτε, πίνετε, καπνίζετε ή μασάτε τσίκλα για 30 λεπτά πριν τη χορήγηση του δειγμάτος του σάλιου σας.

MHN αφαίρετε το πλαστικό φίλμ από το πώμα της χοάνης.

Διαδικασία:

Για τους περισσότερους ανθρώπους απαιτούνται περίπου 2 ώρες 5 λεπτά για τη χορήγηση ενός δειγμάτου σάλιου ακολουθώντας τα βήματα 1 έως 5.

- 1 Πτύστε μέσα στη χοάνη, ένας όπου η στάθμη του υγρού σάλιου (όχι οι φυσαλίδες) να φτάσει στη γραμμή πλήρωσης που φαίνεται στην εικόνα 1.
- 2 Κρατήστε όρθιο τον σωλήνα με το άλλο χέρι (όπως απεικονίζεται πάνωταν στη φωτογραφία) εμπυράντα την σωλήνα με την επιφάνεια της χοάνης με το άλλο χέρι (όπως απεικονίζεται πάνωταν στη φωτογραφία) εμπυράντα την σωλήνα με την επιφάνεια της χοάνης με το άλλο χέρι (όπως απεικονίζεται πάνωταν στη φωτογραφία).
- 3 Μαντέντε την σωλήνα με την επιφάνεια της χοάνης με το άλλο χέρι (όπως απεικονίζεται πάνωταν στη φωτογραφία) εμπυράντα την σωλήνα με την επιφάνεια της χοάνης με το άλλο χέρι (όπως απεικονίζεται πάνωταν στη φωτογραφία).
- 4 Χρησιμοποιήστε το μικρό καπάκι για να κλείσετε καλά τον σωλήνα.
- 5 Ανακινήστε τον κλεισμένο σωλήνα για 5 δευτερόλεπτα. Απορρύψτε ή ανακυκλώστε τη χοάνη.

Συλλέξτε το σάλιο έως (Hμ/νία λήξης)

Αριθμός καταλόγου

Προσδοκή, συμβουλεύετε τις οδηγίες χρήσης

15°C / 30°C


Οδηγίες αποθήκευσης

Κατασκευαστής

Οδηγίες αποθήκευσης

Κατασκευαστής

PORTUGUÊS Instruções para o utilizador

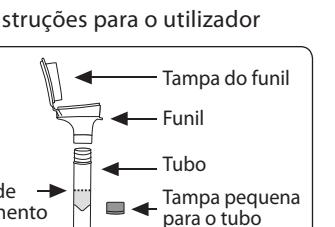

Leia todas as instruções antes da recolha.

Fim a que se destina: Para a recolha de ADN humano a partir de amostras de saliva.

Conteúdo: O kit contém líquido estabilizador.

Avisos e precauções: Se o líquido estabilizador entrar em contacto com os olhos ou a pele, enxágue. Não ingira. Ver a ficha de dados de segurança em www.dnagenotek.com.

Tampa pequena, risco de asfixia.

Armazenamento: 15°C / 30°C

Sumário e explicação do kit:

go DNA™ é um kit de auto-recolha que fornece os materiais e instruções para a recolha e estabilização de amostras de saliva.

Precauções para a recolha:

NÃO coma, beba, fume ou masque chiclete por 30 minutos antes de fornecer a amostra de saliva.

NÃO remova o filme plástico da tampa do funil.

Procedimento:

A maioria das pessoas leva de 2 a 5 minutos para fornecer uma amostra de saliva seguindo as etapas 1 a 5.

- 1 Deite a saliva no funil até a quantidade de saliva líquida (não as bolhas) atingir a linha apresentada na figura nº 1.
- 2 Segure o tubo na vertical com uma mão. Feche a tampa com a outra mão (conforme mostrado) empurrando-a com firmeza até ouvir nitidamente um clique. O líquido na tampa solta-se para dentro do tubo para se misturar com a saliva. Certifique-se de que a tampa está completamente fechada.
- 3 Segure o tubo na vertical. Desenrosque o funil do tubo.
- 4 Use a tampa pequena para fechar bem o tubo.
- 5 Agite o tubo tampado por 5 segundos. Descarte ou recicle o funil.

Legenda da etiqueta:

Recolher saliva até (utilizar até)


Número de catálogo

Atenção: consultar as instruções de utilização

Instruções de armazenamento

Fabricante

PORTUGUÊS – Brasil Instruções de uso

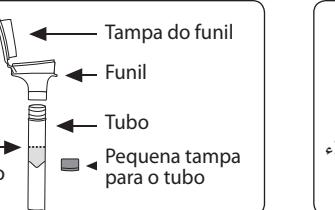

Leia todas as instruções antes da coleta.

Aplicação: Para a coleta de DNA humano em amostras de saliva.

Conteúdo: O kit contém líquido estabilizante.

Avisos e precauções: Se o líquido estabilizante entrar em contacto com a pele ou com os olhos, lave-os com água. Não ingerir. Veja MSDS em www.dnagenotek.com.

Tampa pequena, perigo de asfixia.

Armazenamento: 15°C / 30°C

Resumo e explicação do kit:

go DNA™ é um kit de auto-coleta que proporciona os materiais e as instruções para a coleta e estabilização de espécimes de saliva.

Precauções durante a coleta:

NÃO coma, beba, fume ou masque chiclete por 30 minutos antes de fornecer a amostra de saliva.

NÃO remova o filme plástico da tampa do funil.

Procedimento:

As pessoas a maioria demora entre 2 e 5 minutos para fornecer uma amostra de saliva seguindo as etapas 1 a 5.

- 1 Sussurre no funil até a quantidade de saliva líquida (não as bolhas) alcançar o nível de enchimento exibido na figura nº 1.
- 2 Segure o tubo na vertical com uma mão. Feche a tampa com a outra mão (conforme mostrado) empurrando-a com firmeza até ouvir um forte estalo. O líquido na tampa será liberado no tubo para se misturar à saliva. Certifique-se de que a tampa está completamente fechada.
- 3 Segure o tubo na vertical. Desenrosque o funil do tubo.
- 4 Use a tampa pequena para fechar bem o tubo.
- 5 Agite o tubo tampado por 5 segundos. Descarte ou recicle o funil.

Legenda de embalagem:

Coletar saliva até (usar até)


Número de catálogo

Cuidado, consultar as instruções de uso

Instruções de armazenamento

Fabricante

العربية تليميٰت المستخدم

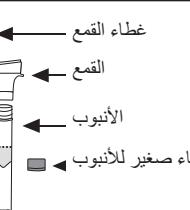

قم بقراءة التليميٰت قبل عملية الجمع.

الهدف: لجمع الحمض النووي البشري DNA من عينات اللعب.

المحتويات: تحظى المجموعة على سائل للتوازن.

تحذيرات وتنبيهات: إغسل بالماء إذا لامس النوازن أو

الجلد. لا تقم بابتلاعه. انظر ورقة البيانات والسلامة للمواد على

الموقع www.dnagenotek.com على

الموعد.

غطاء صغير، خطر الاختناق.

خط تخزين: 15°C إلى 30°C

ملخص وشرح للمجموعة:

الأغراض . الحمض النووي البشري go DNA™ هو مجموعة شخصية توفر المواد والليميٰت عن كيفية جمع وموازنة عينات اللعب.

تنبيهات بخصوص الجمع:

لا تأكل ولا تشرب ولا تخزن أو تخضع للبيان لمدة 30 دقيقة قبل إعطاء

عينة اللعب الخاص بك.

لا تقم بالزلاعة البلاستيكية من القمع.

الطريقة:

معظم الناس يحتاجون إلى ما بين 2 إلى 5 دقائق تقديم عينة اللعب خلال الخطوات من 1 إلى 5.

أقصى في القمع حتى تصل كمية اللعب السائل (بدون فقاعات) إلى الخط الموضح في الصورة رقم 1.

أمسك الأنبو بشكل عمودي بيد واحدة.أغلق غطاء القمع باليد

الأخرى (كما هو موضح) بقوة عن طريق دفع العطاء حتى تسمع صوت طقطقة السائل في العطاء سيخرج إلى الأنبو ليحدث المزج مع اللعب. تأكّم من أن العطاء مغناطيسياً.

أمسك بالأنبو بشكل عمودي قائم.

قم بفك القمع من الأنبو.

قم باستخدام العطاء الصغير لإغلاق الأنبو بلحاظ.

فم بهز الأنبو المغطى لمدة 5 ثوانٍ. قم بالخلص من القمع أو وضعه لإعادة التدوير.

الخاتمة:

اجمع اللعب (بواسطة)

رقم الكالوج

تنبيه، راجع تليميٰت الاستخدام

الشرطة الصانعة

Fabricante

中文 使用说明



采集前，请阅读所有说明。

指定用途：从唾液样本搜集人 DNA。

内容：工具包中含有稳定液体。

警告および注意：如果稳定液体接触您的眼睛或皮肤，请用水清洗干净。切勿吞食。请登陆

www.dnagenotek.com 查阅化学品安全技术说明书 (MSDS)。

小盖子，哽塞危险。

储存：15°C 至 30°C

工具包的概述和说明：

go DNA™，使用自采集试剂盒，试剂盒中含有采集和稳定唾液样本需要的材料和说明。

采集注意事项：

切勿在提供您的唾液样品前 30 分钟内进食、

饮水、吸烟或嚼口香糖。

切勿去除漏斗盖上的塑料膜。

步骤：

遵循步骤 1 至 5，大多数人需要花费 2